

What's “フリープルアウト”？ 新型車いす固定装置

軽福祉車トップクラスの明るい広い室内空間が好評のミニキャブ福祉車シリーズ。今回は、08モデルより前側の手動式車いす固定装置として標準装備されている、“フリープルアウト式”の新型車いす固定装置についての特集です。



片手で引き出し・自動でロック！

「フリープルアウト」とは？…


従来の車いす固定装置は、固定解除レバーを押しながらベルトを引出す必要がありました。新型では、**固定解除レバーを押さなくても固定ベルトが引出せます。(フリープルアウト)**車いす固定ベルトを片手で引出せるので、固定操作が簡単にできるようになりました。

そのしくみは？…

固定ベルト引出し長さが約10cm以下になると自動的にロック機構が解除され、固定ベルトが自由に引出せるようになります。

赤い線が見えていないときはロック機構が解除され、固定ベルトを引出し可能

赤い線が見えているときはロック機構が働いてベルトを自動でロック

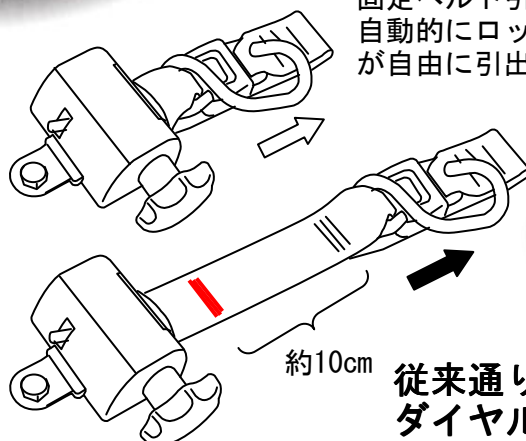

従来通りレバーでのロック解除、ダイヤルでの増し締めもできます。

ミニキャブ福祉車シリーズは “フリープルアウト式固定装置” を標準装備しています！（前側のみ）



Photo: タウンボックス車いす仕様車テールゲートリフト式オプション(車いす専用3点式シートベルト)装着車



Photo: タウンボックス車いす仕様車ニールダウン式オプション(車いす専用3点式シートベルト)装着車

＜ご注意＞ 車いす固定装置は使い方を誤ると重大な事故や装置の破損につながるおそれがあります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、機能や正しい使い方を十分にご理解の上でご使用ください。

特装車のことならなんでもお気軽にお問合せ下さい。

詳しくは Web で！

丸文特装車

検索

＜お問合せ・資料のご請求は＞

株式会社 丸文 特装部 MSPV since1959

tel 086-446-8105 fax 086-446-8103

e-mail mspv@marubun-car.jp

※掲載した情報は2008年6月現在のものです。仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。